

還元粋 [RW-6]

かんげんすい

水が変わる、からだが変わる、
家族の笑顔が変わる。



QRコードで簡単チェック!

お持ちのスマートフォンやタブレットでQRコードを読み込むと、説明動画がご覧いただけます。

動画「RW-6」



効果・効能

胃腸症状の改善

胃もたれや胃の不快感をやわらげます。
胃腸の働きを助け、お通じを良好にします。

医療機器製造販売認証番号:226AGBZX00033A01

※本器は医薬品医療機器等法(旧薬事法)第2条第4項の政令で定める医療機器であり、第6項の厚生労働大臣が指定した管理医療機器です。



還元粋 [RW-6]

WACC方式5枚電極4槽構造
【水道直結連続生成型電解水素水整水器】

水の中は水素の宝庫。水の電

水が変わると、
からだが変わる。
笑顔も変わる。

還元剤が
守りたいのは、
幸せな家族の日常です。


家族はかけがえない宝物。
私たちのカラダの約70%
は水でできており、日々カ
ラダに摂り入れている水は、
私たちの健康を左右すると
ても重要な存在です。
大切な家族の輝く笑顔のた
めに、そしてすこやかで幸せ
な日常を守るために。あら
ためて水の質について考え
てほしい。そんな想いがこめ
られた還元剤RW-6はご家
族の健康を守るパートナー。
抗酸化性のある電解水素
水を、飲料水としてはもちろ
ん、幅広い用途にお役立て
ください。

動画
「医療効果認証」



水の中は水素の宝庫。 水の電気分解から電解水素水を生成。

水は化学式で言うと「 H_2O 」。水素が2つと酸素が1つで構成されています。
通常この水素と酸素を切り離すことはできません。しかし電気分解することで
水素と酸素を切り離すことができます。切り離された「分子状水素」をたくさん
含む水を電解水素水と呼んでいます。
様々な水を作る機器は、巷に山ほど
ありますがこの電解水素水整水器は
家庭用の管理医療機器として認証さ
れています。

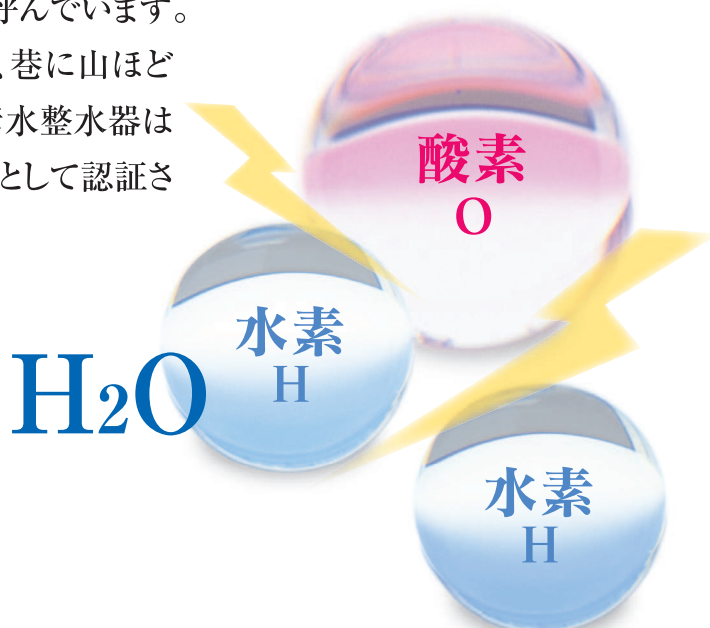

「水」は水素と酸素が結びついて生まれます。


気分解から電解水素水を生成。



※設置イメージ

電解水素水は還元力(抗酸化性)のある水素を含んだ水です。

- 本器は、薬事法第41条第3項の規定により厚生労働大臣が定める医療機器の基準(平成17年3月29日厚生労働省告示第122号)に適合したものである。
- 本器は、薬事法第23条の2第1項により厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成17年3月25日 厚生労働省告示第112号)の一般的要求事項、設計及び製造要求事項を満たしたものである。

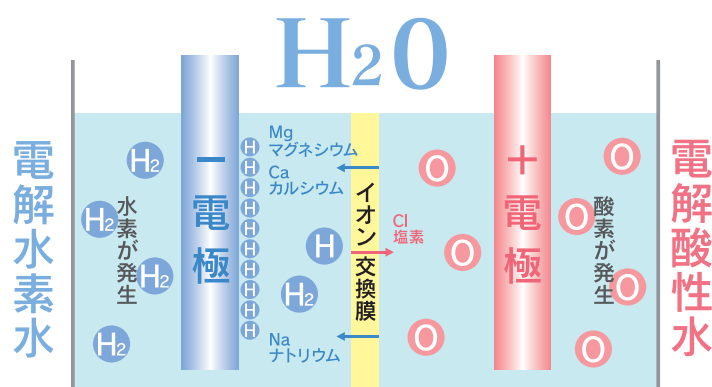

酸化と還元の関係

還元とは(電解水素水)

水素と化合すること。酸素を失うこと。電子を得ること。例えば鉄などを錆びにくくさせる。リンゴなどが変色しにくくなる。このような作用が還元の代表的な反応です。

酸化とは

酸素と化合すること。水素を失うこと。電子を失うこと。例えば鉄などを錆びさせる。リンゴなどを変色させる。このような作用が酸化の代表的な反応です。



「水」を還元剤で電気分解。

水素を多く含んだ

「電解水素水」と酸素を含んだ「電解酸性水」。

ご家庭の水道水を還元剤[RW-6]で電気分解すると、この2種類の水を同時に生成することができます。

動画「酸化と還元」



動画「活性酸素の原因」



安定した電解水素水の生成を

業界最先端のターボ機能とは。

ターボスイッチをワンプッシュ!
水素 MAX!

- ターボスイッチワンプッシュで一回当たり
約 60秒間
- 最大電解電流を**10%アップ**。
安定性を考慮したターボ機能です。
- 水道水の水質は全国一律ではありません。なかには、電気分解しにくい地域もあるためターボ機能を搭載。通常の水素水モードよりも高い生成能力を発揮し、地域の水水道水状況に合わせてお使いいただけます。
※連続でのご使用はお控え下さい。



電解水素水を安定的に生成するために ダブル・オートチェンジ・クロスライン(WACC) 方式の採用

電気分解をするとマイナス極側の電極板には、カルシウムやマグネシウム等のミネラル成分が付着します。数年使用すると電極板はミネラルで覆い隠されてしまいます。こうなると電気分解はできにくくなってしまいます。そこで RW-6 は定期的に電極の極性と水路を切り替える独自の技術『ダブル・オート・チェンジ・クロスライン方式』を採用。ミネラル等の付着を防ぎ、安定した電気分解を行います。




動画「ターボ機能」



WACC方式5枚電極4槽構造
水道直結連続生成型
電解水素水整水器

医療機器製造販売認証番号:
226AGBZX00033A01

【効能又は効果】:
胃腸症状の改善の為の飲用
アルカリ性電解水の生成
【使用目的】:
一般家庭で使用するこ

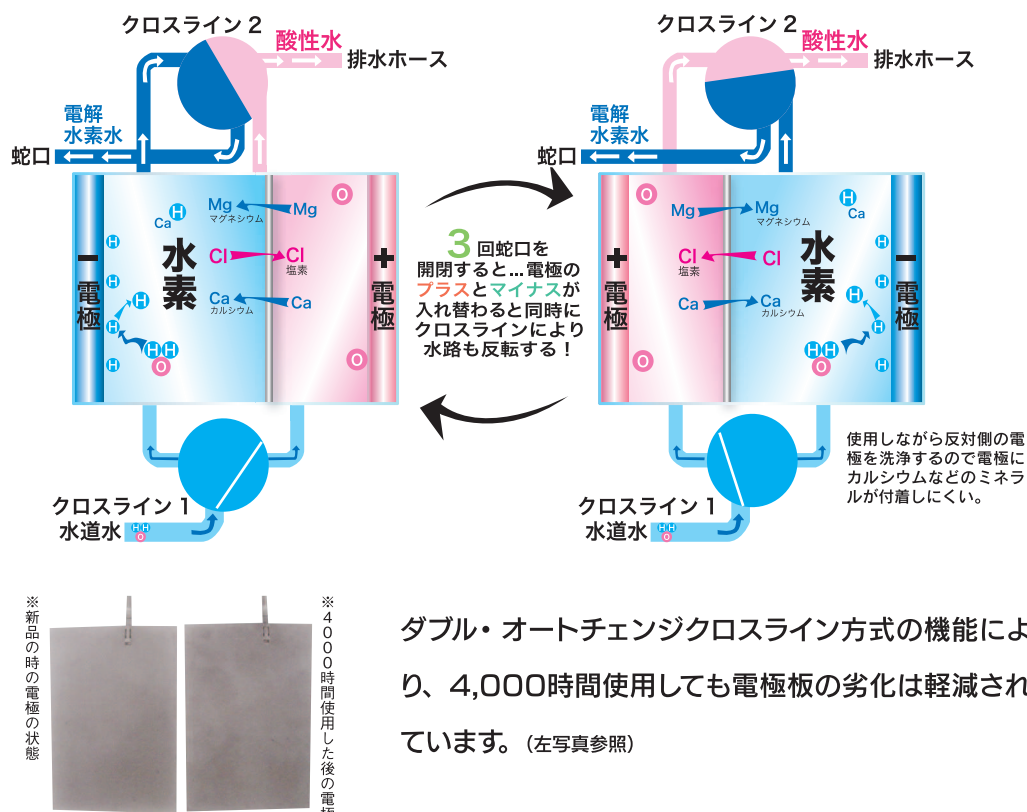

ダブル・オートチェンジクロスライン方式の機能により、4,000時間使用しても電極板の劣化は軽減されています。(左写真参照)

可能にする独自の最新機能。

高効率多層型電解槽プラチナメッキ 5枚電極


水の電気分解を効率的にするためには水の単位体積当たりの電気量を大きくすることが必要です。RW-6は4電解槽8層に分かれた多層型電解槽を採用し電解効率を高くしています。

本体内部の水道水圧が過剰に高くなった場合に備え、セーフティバルブ機能を採用しています。

ツインセーフティバルブ機能

スイッチング・レギュレーター制御方式

水道水は、季節・温度・地域等によってその水質が異なります。安定した電解水素水を生成するためには、電気分解する水に対して一定の電流を流さなければなりません。還元剤シリーズは電流を優先的に設定し、電圧を自動的に選択するスイッチング・レギュレーター制御方式を採用し、水質の変化に対応して安定した電解水素水を生成します。

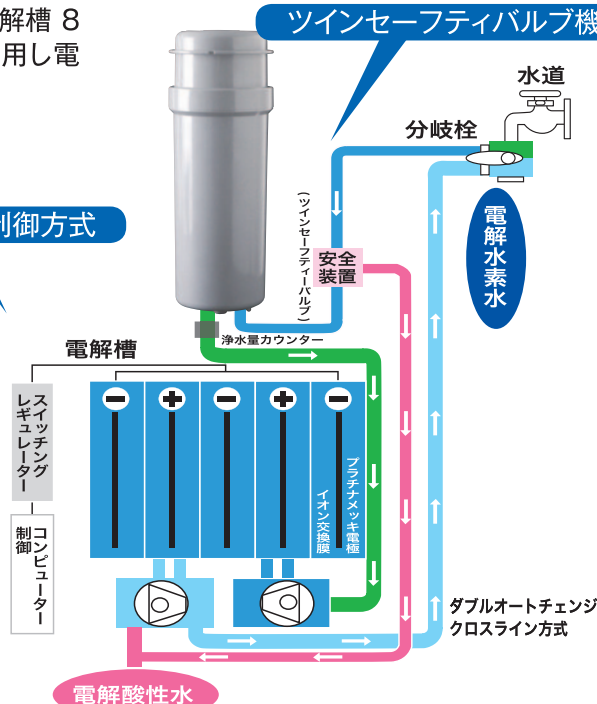

大型液晶パネル

溶存水素量(目安)と機器の状態が一目でわかる→

電解水素水の溶存水素量の目安を電解条件により算出し推測値を液晶画面に表示できるようになりました。

さまざまな情報を大型液晶パネルに表示します。

- ・現在生成されている水の種類を文字と色でお知らせ、用途をイラストにて表示
- ・カートリッジ累積使用量と累積使用時間
- ・お客様相談窓口のフリーダイヤル

モードと新pHの目安

①下図のpH目安は、原水が標準の水道水の割合の数値です。

(原水の標準をpH:6.5~7.5とする)

②原水の遊離炭酸が多い・硬度が低い場合は、水素水のpHは低くなる傾向です。→ターボ機能を活用

③原水の硬度が高い・浜辺や島の場合は、水素水のpHは高くなる傾向です。→レベル2又は1使用

スイッチ	整水モード	レベル	用途	pH目安*
①水素水スイッチ	電解水素水モード	強	調理用	9.0~10.5
		3	飲用	8.5~9.9
		2	飲用	8.0~9.5
		1	飲用	7.5~9.0
②浄水スイッチ	浄水モード		飲用	電解なし
③酸性水スイッチ	酸性水モード	弱	洗顔用	4.5~6.8
		強	洗浄用	3.5~5.5

水素水 強 (飲用) 水素量 480ppb	水素水 3 (飲用) 水素量 300ppb
水素水 2 (飲用) 水素量 200ppb	水素水 1 (飲用) 水素量 80ppb

ターボ
水素量 510ppb

※ pHは水質(地域・季節・水温)によって異なります。

※ 飲用する場合は pH10未満であることを確認してからご使用下さい。

※ 液晶パネルはイメージです。

動画「溶存水素量
表示機能」



液晶表示一覧

電解水素水モード

水素水 強
(調理)

水素水 3
(飲用)

水素水 2
(飲用)

水素水 1
(飲用)

浄水モード

浄水 (薬・ミルク)

酸性水モード

酸性 (弱)

通水量 3.7ℓ/分

酸性 (強)

通水量 3.8ℓ/分

※ 水素量表示は電解条件により算出した推測値です。

家族みんなで使える還元

大容量浄水カートリッジ。※1 JIS規格による指定17物質を除去し16トン使用可能。

マイクロカーボンカートリッジは、非常に細かい活性炭（マイクロカーボン）で構成されており、溶解物質の吸着が早く、濁りなどの微粒子までしっかり取り除きます。

マイクロカーボンだけでJIS規格指定17物質※1の除去が可能になりました。


また、ろ過材が目詰まりしにくく、水が流れやすいのが特徴です。

マイクロカーボン カートリッジ

DELUXE

■マイクロカーボン
(非常に細かい活性炭)
内部に無数の微細孔を持つ
多孔性の炭素物質。
17物質を吸着します。

■不織布
繊維を3次元構造に重ね合
わせ結合した多孔質シー
ト。マイクロカーボンを通
る前に、この部分で大きな
粒子の物質を除去します。

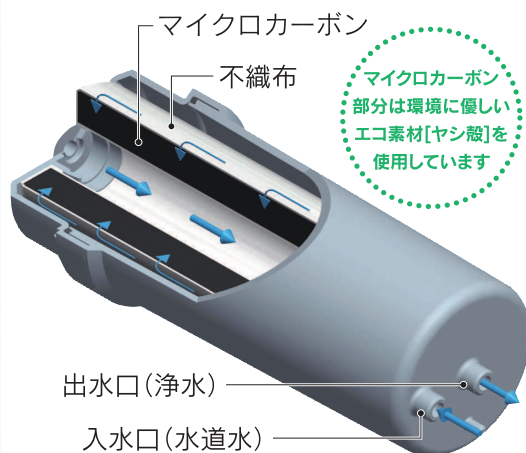

※カートリッジの交換は通水 16トンもしくは2年となります。

※1 JIS規格で指定された除去対象 17物質

① 遊離残留塩素 (カルキ)	消毒用添加物質で、水の味を損なう原因となっています。
② 濁り	水の中にある微粒子等の濁りを発生させる物質です。
③ クロロホルム	水道原水の有機化合物と塩素が反応してできる物質です。
④ ブロモジクロロメタン	
⑤ ジブロモクロロメタン	
⑥ ブロモホルム	樹脂・香料・染料の抽出溶剤、洗浄剤などに使われています。
⑦ シス-1,2-ジクロロエチレン 及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	
⑧ テトラクロロエチレン	ドライクリーニング用の洗浄剤や金属洗浄用の溶剤などに使われています。
⑨ トリクロロエチレン	金属洗浄用の溶剤のほか、生ゴム、染料の溶剤等に使われています。
⑩ ベンゼン	染料・医薬品・農薬等の様々な化学品の合成原料、溶剤、抽出剤などに使われています。
⑪ 総トリハロメタン	③～⑥の総称を「総トリハロメタン」としており、水道原水の有機化合物と塩素が反応してできる物質です。
⑫ CAT (農薬)	除草剤に広く使用されています。
⑬ 2-MIB (カビ臭)	植物プランクトンにより産出されるもので、いやな臭いの原因となります。
⑭ 溶解性鉛	水道用鉛管を使用する地域や家庭において水道水中に溶け込んでいます。
⑮ 陰イオン界面活性剤	石けんをはじめ、多くの合成洗剤に使用されています。
⑯ フェノール類	染料や樹脂などの製造に使用されており、不快な臭味をつけます。
⑰ ジェオスミン (カビ臭)	植物プランクトンにより産出されるもので、いやな臭いの原因となります。

動画「カートリッジ①」



使い易さと設置場所まで考えた2ウェイ方式



今ご使用の蛇口から、レバー 1つで電解水素水と
原水の切り替えができます。



ご家族の
台所事情に合わせ、
壁掛け設置も可能。

粹[RW-6]の優しい機能



整水器と浄水器の違いとは

水をろ過して不純物を取り除くのが浄水器です。整水器は、浄水された水をさらに電気分解して抗酸化性がある水素を豊富に含んだアルカリ性の電解水素水をつくります。

これは胃腸症状の改善に効果・効能があると認められた家庭用管理医療機器です。

家庭用ではトップクラスの通水量

取水排水比率を5:1にすることにより、電解水素水および電解酸性水の使用時での6リットル/分の生成を実現しています。同時にホース排水量の削減によるエコに役立っています。

※地域の水圧等により異なる場合があります。

水質の違いによる取水確認

電解水素水はメロディー音、酸性水はブザー音にて区別いたしました。

目の不自由な方も音で判断できます。その他、「メヌエット」

「アンパンマンのマーチ」(作曲者: 三木 たかし / JASRAC® T-1440129) の選曲と音量設定ができます。

カートリッジ交換サインは

液晶画面と音声でお知らせ

浄水カートリッジが交換時期になると、液晶画面に黄色で表示され音声でも交換時期(7日前もしくは残り150ℓの時点)をお知らせいたします。

カートリッジ交換の目安

浄水カートリッジの交換時期は使用水量を積算し、16,000 リットルになると液晶画面でお知らせします。(使用量が、16,000 リットルに満たない場合でも2年経過すると交換時期としてお知らせします。)

*1日22リットル通水した場合2年で交換、1日44リットル通水では1年で交換となります。

*通水量が1分5リットルの場合、5分間使用すると25リットルの通水となります。

動画「パネル操作」



快適な生活のもとになる



電解水素水は健やかに美しく生活するサポートをしてくれる良質な水です。

水を電気分解したときに陰極(マイナス)側で生成された還元性を持つ水素を豊富に含んだ水です。

そのままお飲みになったり調理にもお使いください。

飲料

そのままはもちろん、お茶・紅茶・コーヒーの味を引き立てます。

アク抜き

調理素材のアク抜きにもお使いいただけます。



ダシ

ダシを取るときにお使いいただくと、濁りのない透明感のある上品なダシがとれます。

料理

煮物など煮込み料理では、旨味と風味を引き立てます。



いつもの飲み物をより美味しく。まろやかなのど越し。

水	電解水素水
お茶や紅茶がよく出ます。	

毎日の飲料用「水」としてはもちろん、スポーツ後の給水にも最適。コーヒーは薫り高く、お茶は色が美しく出て味わいも豊かに。水の臭いも気にならず、まろやかなのど越しが味わえます。

美味しいご飯にこだわる人の電解水素水

水	電解水素水
お米研ぎ(水素水強)から炊飯(水素水2のボタン)まで、上手なご飯炊きにぴったり。お米のひと粒ひと粒をふっくら美味しく仕上げます。	

野菜だって、電解水素水が大好き。たっぷりの電解水素水に浸けましょう。

水	電解水素水
電解水素水で十分に洗浄し、料理前にたっぷりの電解水素水に浸しておくと、さらに野菜本来の味を引き立ててくれます。新鮮な野菜料理を毎日の食卓に。	

野菜などの洗い水として。

動画「お茶の実験」



動画「米の実験」



動画「トマトの実験」



のは、安心できる水から。

酸性水

水を電気分解したときに陽極(プラス)側で生成された水です。肌に優しい酸性水は洗顔・洗髪、浴湯に混ぜてご利用することをおすすめいたします。



揚げ物

揚げ物に酸性水を使うと「カラッ」と揚げられます。

掃除

汚れ落ちがよく、乾きがいいので拭き掃除や台所用品の浸け置き洗いに おすすめ。



洗顔

酸性水で蒸しタオルやコットンパックでスキンケアは、おすすめです。



浄水

薬を飲む時やミルクを作る時にご利用ください。高性能カートリッジで、水道水に含まれている残留塩素やカルキ臭、カビ臭を取り除いた電気分解していない水です。



原水

食器などの洗い物や普段お使いの水が必要な場合は原水シャワーをお使いください。通常の蛇口もお使いいただけます。



標準取付が出来る蛇口例

最近多く見られる蛇口です。標準タイプのアダプターセットで取付ができます。

※ごく稀ですが泡沫の口径・ネジの間隔があわないものもあります。その場合には、「特殊アダプター」(別売)が必要な場合があります。



分岐水栓の取付方法

Aタイプ




- 蛇口パイプ径 (16mm・17.5mm・19mm)
- 先端のふくらんだタイプは、Aタイプのアダプターをご使用ください。

Bタイプ




- 泡沫金具を外すとパイプの外側にネジが現れるタイプ。
- 外ネジ型はBタイプのアダプターをご使用ください。

Cタイプ

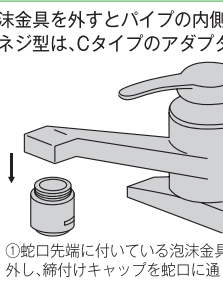

- 泡沫金具を外すとパイプの内側にネジが現れるタイプ。
 - 内ネジ型は、Cタイプのアダプターをご使用ください。
- ①蛇口先端に付いている泡沫金具を取り外し、締付けキャップを蛇口に通します。
- ②蛇口に分岐水栓のバックリングが密着するように押し上げながら、締付けキャップをしっかりと締め付け、取付けます。

Dタイプ

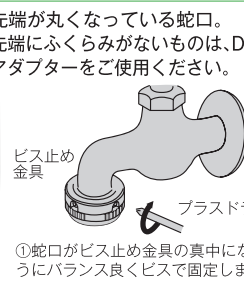

- 先端が丸くなっている蛇口。
 - 先端にふくらみがないものは、Dタイプのアダプターをご使用ください。
- ビス止め金具
- プラスドライバー
- ①蛇口がビス止め金具の真中になるようにバランス良くビスで固定します。
- ②蛇口に分岐水栓のバックリングが密着するように押し上げながらビス止め金具をしっかりと締め、取付けます。

※Dセットは別途取り寄せとなります。販売店にお申し付けください。

分岐水栓使用取付例

現在、食器洗い乾燥機等で分岐されている方にお勧めします。

※料金は目安であり、取付の場所の状況によって多少異なります。 ※他の専用蛇口がご希望の場合はサービスマンに相談してください。



2分岐コック
NS-K6
7,150円(税込)
(6,500円 税別)

給水ジョイント
JNSJJ6AN
2,420円(税込)
(2,200円 税別)

NSJ用
分岐コック
NSG1313
5,500円(税込)
(5,000円 税別)

取付前

=

リターンバルブNSJRA1
5,777円(税込)
(5,252円 税別)

=

回流コックRW006
4,950円(税込)
(4,500円 税別)

作業料 **6,600円(税込)**(6,000円 税別)

取付例／合計 **27,447円(税込)**
(24,952円 税別)

作業料 **6,600円(税込)**(6,000円 税別)

取付例／合計 **26,620円(税込)**
(24,200円 税別)

食器洗い乾燥機を同時に使われる場合

シングル分岐栓

還元栓へ

食器洗い乾燥機へ

標準取付が出来ない蛇口例

吐水口がお風呂のシャワーのような形をしているもの、通常吐水口は円筒形ですが中には角型や細身の円筒形など変わった形のもの、ビルトイン(アンダーシンク)型浄水器専用の蛇口は、標準アダプターが取付できません。このタイプの蛇口のお客様には別途工事が必要となります。



消耗品一覧

RW601
マイクロカーボン
カートリッジDX
(16トンもしくは
最長2年交換)



標準価格
15,950円(税込)
(14,500円 税別)

(取替作業含)
21,450円(税込)
(19,500円 税別)




RW020A
一次フィルター
ケースセット(鉛除去)
4,950円(税込)(4,500円 税別)

PF204K3
交換用フィルター(3本セット)
3,850円(税込)(3,500円 税別)



RW020
一次フィルター・
交換用フィルターセット
4,950円(税込)(4,500円 税別)

HV98PK5
交換用フィルター(5本セット)
3,850円(税込)(3,500円 税別)

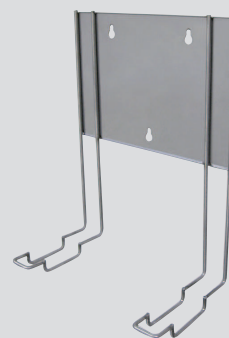


RW8 BUR
壁掛けハンガー
(RW-8・6用)
5,500円(税込)(5,000円 税別)


付帯工事例

専用の部品がちょっとした工夫で取付けられる例です。

専用蛇口取付例

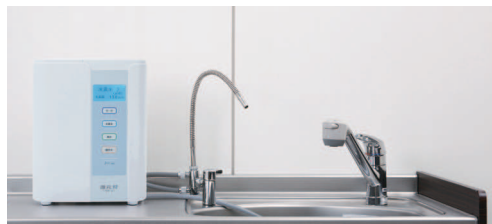

スッキリ、コンパクトに取付けられます。
シンクカウンターに直径25mmの穴をあけてシンク下で分岐。

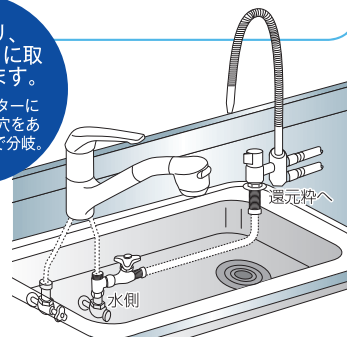

標準取付できない場合や、お客様が使い易い取付けを希望される場合にお勧めします。

※料金は目安であり、取付の場所の状況によって多少異なります。 ※他の専用蛇口をご希望の場合はサービスマンに相談してください。

先止水栓 NSJCT7 TY-003 7,700円(税込) (7,000円 税別)	+	リターンバルブ NSJRA1 5,777円(税込) (5,252円 税別)	+	片ナットチーズ T6-6XG 1,870円(税込) (1,700円 税別)	+	フレキパイプ PT193A 2,585円(税込) (2,350円 税別)	+	止水栓 V26A13 2,530円(税込) (2,300円 税別)	=	作業料 13,200円(税込)(12,000円 税別) 取付例／合計 33,662円(税込)(30,602円 税別)
--	---	--	---	--	---	---	---	--	---	---

蛇口 SANEI JA575H-13 8,085円(税込) (7,350円 税別)	+	(新)中継分岐栓 RW005B 4,950円(税込) (4,500円 税別)	+	片ナットチーズ T6-6XG 1,870円(税込) (1,700円 税別)	+	フレキパイプ PT193A 2,585円(税込) (2,350円 税別)	+	止水栓 V26A13 2,530円(税込) (2,300円 税別)	=	作業料 13,200円(税込)(12,000円 税別) 取付例／合計 33,220円(税込)(30,200円 税別)
--	---	---	---	--	---	---	---	--	---	---

シングル分岐栓取付例1

キッチンシンクに取り付けている蛇口で標準取付が出来ない場合に使用します。特にキッチン加工が出来ないお宅にお勧め致します。この場合、蛇口によって必要な材料が異なりますので必ずメーカー名・型式が必要となります。

取付前	+	シングル分岐栓 14,850円(税込)~20,900円(税込) (13,500円 税別)~(19,000円 税別) (蛇口により異なります。)	+	リターンバルブ NSJRA1 5,777円(税込) (5,252円 税別)	+	回流コックRW006 4,950円(税込) (4,500円 税別)	=	作業料 6,600円(税込) (6,000円 税別) 取付例／合計 27,227円(税込)(24,752円 税別) 33,277円(税込)(30,252円 税別)
取付前	+	シングル分岐栓 NSJ-S268A7 8,580円(税込) (7,800円 税別)	+	リターンバルブ NSJRA1 5,777円(税込) (5,252円 税別)	+	回流コックRW006 4,950円(税込) (4,500円 税別)	=	作業料 6,600円(税込) (6,000円 税別) 取付例／合計 26,400円(税込)(24,000円 税別) 32,450円(税込)(29,500円 税別)

シングル分岐栓取付例2

キッチンの壁面に取り付けている蛇口で標準取付が出来ない場合に使用します。

取付前	+	シングル分岐栓 NSJ-S268A7 8,580円(税込) (7,800円 税別)	+	リターンバルブ NSJRA1 5,777円(税込) (5,252円 税別)	+	回流コックRW006 4,950円(税込) (4,500円 税別)	=	作業料 6,600円(税込) (6,000円 税別) 取付例／合計 20,957円(税込)(19,052円 税別)
取付前	+	シングル分岐栓 NSJ-S268A7 8,580円(税込) (7,800円 税別)	+	リターンバルブ NSJRA1 5,777円(税込) (5,252円 税別)	+	回流コックRW006 4,950円(税込) (4,500円 税別)	=	作業料 6,600円(税込) (6,000円 税別) 取付例／合計 20,130円(税込)(18,300円 税別)

その他取付

その他にもより使い易い取付け方法がございますので参考にして下さい。

●吐出パイプの脱着が可能な蛇口



取付前	+	中継分岐栓 RW005 4,950円(税込) (4,500円 税別)	=	取付例／合計 4,950円(税込)(4,500円 税別)
------------	---	---	---	-------------------------------------



※仕様及び価格等は改良のため予告なく変更することがございます。

安心の3年保証

通常1年の保証を
3年に延長した安心保証
保証内容は商品添付の3年間保証書をご覧ください。

排水ホースから出る水を溜られる場合は、蛇口の閉め忘れにご注意ください!

【注意項目】:蛇口がわずかも開いている場合は、水が排水ホースだけに流れますので、溜めていたタンクなどから溢れてしまうことがあります。

【発生事例】:台所の床でポリタンクに排水ホースの水を溜めておられ、おやすみになる前に蛇口を閉められたが完全に閉まっておらず、朝方まで溢れた状態でした。お客様宅がマンションでしたので下の階にまで漏れてしまったことが発生しております。

十分にご注意ください。

その他の特徴

●スイッチング・レギュレーター制御方式!

水道水は、季節・温度・地域などにより水質が異なりますが、還元粋[RW-6]はスイッチング・レギュレーター方式の採用により、安定した電解水素水を生成します。

●ツインセーフティバルブ機能!

間違えて熱いお湯が入った時でもツインセーフティバルブ機能により熱湯を弁で遮断し本体を守ります。

●電解機能をパワーアップ!

電解電圧をパワーアップした事により、原水や井戸水でも安定した電解水素水を生成します。

三和全国サービスネットワーク

■取付メンテナンスのお問い合わせは

西日本地区 三和株式会社サービス

東日本地区 株式会社クリーンサポート

通話無料

0120-380413

動画「サービス体制」



三和(株)サービス本部

- 福岡県(南部地区)
- 福岡県(東部地区)
- 福岡県(西部地区)
- 福岡県(筑豊地区)

三和(株)サービス西九州

- 福岡県(筑後地区)
- 佐賀県
- 長崎県

三和(株)サービス中九州

- 福岡県(大牟田市)
- 熊本県

※上記以外の離島を除く

三和(株)サービス北九州

- 福岡県(北九州地区)
- 山口県(西部)

三和(株)サービス中国

- 広島県
- 岡山県
- 鳥取県
- 島根県
- 山口県(東部)

三和(株)サービス関西

- 大阪府
- 京都府
- 和歌山県
- 兵庫県
- 奈良県
- 三重県
- 滋賀県

三和(株)サービス四国

- 香川県
- 愛媛県
- 徳島県
- 高知県

三和(株)サービス大分

- 大分県

三和(株)サービス南九州

- 鹿児島県
- 宮崎県
- 沖縄県(本土)

(株)クリーンサポート北海道

- 北海道

(株)クリーンサポート北越

- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 岐阜県(北部)

(株)クリーンサポート東北

- 青森県
- 岩手県
- 秋田県
- 宮城県
- 山形県
- 福島県

(株)クリーンサポート北関東

- 栃木県
- 群馬県
- 茨城県

(株)クリーンサポート関東

- 東京都
- 神奈川県
- 長野県
- 千葉県
- 埼玉県
- 埼玉県

(株)クリーンサポート東海

- 静岡県
- 山梨県

(株)クリーンサポート中京

- 愛知県
- 岐阜県(南部)

還元粋

[RW-6]

■標準価格(標準工事費込)

244,200円(税込)
(222,000円 税別)

■主な仕様

医療機器製造販売認証番号	226AGBZX00033A01
定格電圧	AC100V
定格電流	AC7A
定格周波数	50-60Hz
定格電解電圧	DC70V(max.)
待機電力	約1W
消費電力	約480W
電解槽	4層(8セル)
電極(枚数)	プラチナコーティング電極(5枚)/田中貴金属製使用
電極寿命	電解時間として4000時間
定格生成量 (動水圧250kPaの時)	(電解水素水)6.0ℓ/分(最大) (酸性水)6.0ℓ/分(最大) (浄水)7.0ℓ/分(最大)
配管水圧(静水圧)	50kPa(最低動作水圧)~700kPa
使用可能温水	35℃以下
本体重量	約5kg
本体寸法	271(W)×340(H)×138(D)mm
電源コード長	約2.7m

●JIS規格17物質^{※1}を16トン(除去率80%以上) JIS S 3201 での試験結果(ろ過試験流量4.0ℓ/分)

※1:①遊離残留塩素(カルキ)、②濁り、③クロロホルム、④プロモクロロメタン、⑤ジブロモクロロメタン、⑥プロモホルム、⑦シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン⑧テトラクロロエチレン⑨トリクロロエチレン⑩ペンセン⑪総トリハロメタン⑫CAT(農薬)⑬2-MIB(カビ臭)⑭溶解性鉛⑮陰イオン界面活性剤⑯フェノール類⑰ジェオスミン(カビ臭)

電解槽洗浄方式 ダブル・オートチェンジ・クロスライン方式

電源回路 スwitchング・レギュレーター制御方式

本体保護装置 分岐水栓定流量弁/分岐水栓警告弁(過大水压防止)/定電流制御回路/過熱防止装置/ツイン・セーフティバルブ機能(熱水流入防止、過大水压防止)/ヒューズ8A(基板内蔵)

※地域により原水の状態によってカートリッジ寿命が異なります。
※原水の残留塩素濃度を2ppmとして浄水後の塩素濃度が0.4ppmに達した時点をもって寿命とします。
※本器は改良するため予告なく仕様変更することがありますので製品と一部差異が発生する場合があります。ご了承ください。 ※特殊工事等が発生した際、別途料金がかかります。

カートリッジ交換 マイクロカーボンカートリッジDX

カートリッジの交換時期が近づくと、液晶画面と音声メッセージでお知らせします。
浄水カートリッジの交換時期は使用水量を積算し、16,000リットルになると液晶画面でお知らせします。(使用量が16,000リットルに満たない場合でも2年経過すると交換時期としてお知らせします。)

■標準価格(作業代込)

21,450円(税込)
(19,500円 税別)

※離島の場合は、別途料金がかかります。

作業内容:カートリッジ交換・ホース交換・本体清掃・分岐水栓・機器点検

カートリッジのみ

■標準価格
15,950円(税込)
(14,500円 税別)

ご使用前の注意

- 腎疾患(腎不全やカリウム排泄障害)の方は、飲用しないでください。
- 腎臓に障害がある方は医師に相談してください。

シリーズ最高峰機種

プラチナメッキ
7枚電極! 好評販売中!

還元粋 [RW-8]



商品に関するお問い合わせや
クレジット等のご質問は、

お客様相談窓口



フリーダイヤル
0120-412630

●クレジットでのお支払いもラクラクです。

販売店(お問い合わせ・お申込みは)

総発売元 **SANWA 三和株式会社**

本社 / ☎ 812-0016
福岡市博多区博多駅南1丁目6番9号三和ビル
TEL 092 (471) 5538 (代) FAX 092 (471) 5588

https://www.sanwa-inf.co.jp

製造元



TRIM 株式会社 トリムエレクトリックマシナリー

販売店募集

[2021-004-0100]